

**Программный комплекс «Квазар»**

**Модуль**  
**«Патолого-анатомическое**  
**вскрытие»**

**Руководство пользователя**

---

# Оглавление

Описание модуля .....	3
Права пользователей и роли персонала.....	4
Начало работы с модулем.....	5
<b>Создание записи.....</b>	<b>6</b>
Направление на ПАВ .....	7
Регистрация поступления и выдачи тел умерших .....	8
Протокол ПАВ .....	9
Паспортная часть .....	9
Протокол вскрытия.....	13
Гистологические препараты.....	15
Диагнозы .....	16
Результат .....	20
Редактирование записи .....	20
Удаление записи .....	20
<b>Подпись документа.....</b>	<b>21</b>
<b>Печать.....</b>	<b>23</b>
<b>Экспорт журнала .....</b>	<b>25</b>

---

## Описание модуля

Данный модуль предназначен для ведения журнала патолого-анатомического вскрытия.


## **Права пользователей и роли персонала**

Для доступа к модулю «Патолого-анатомическое вскрытие» необходимы права «Доступ к модулю «Патолого-анатомическое вскрытие».


Роли персонала для данного модуля не используются.

## Начало работы с модулем

Выберите модуль «Патолого-анатомическое вскрытие».

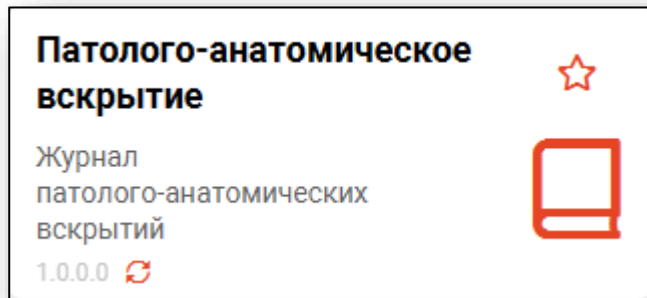


Будет открыто окно модуля.

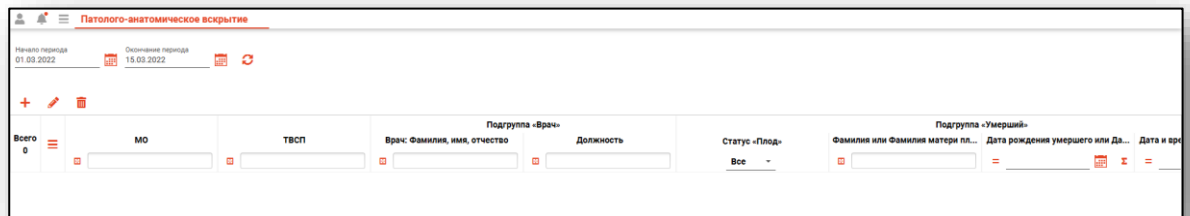

## Создание записи

Для создания записи в журнале «Патолого-анатомическое вскрытие», нажмите на кнопку «Добавить запись».

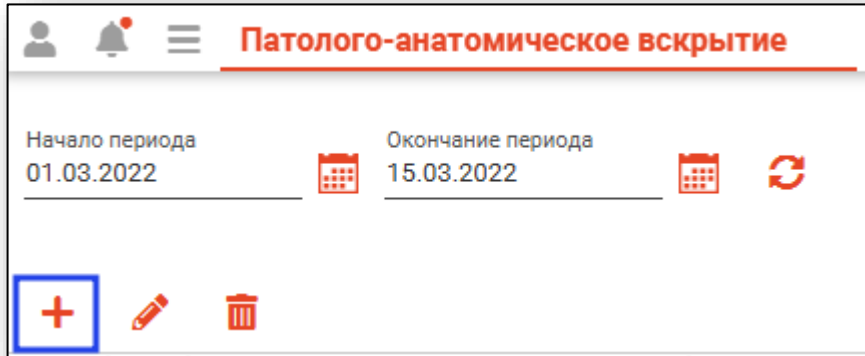


Патолого-анатомическое вскрытие

Начало периода 01.03.2022

Окончание периода 15.03.2022

+ ✎ 🗑

Будет открыто окно «Добавить запись».

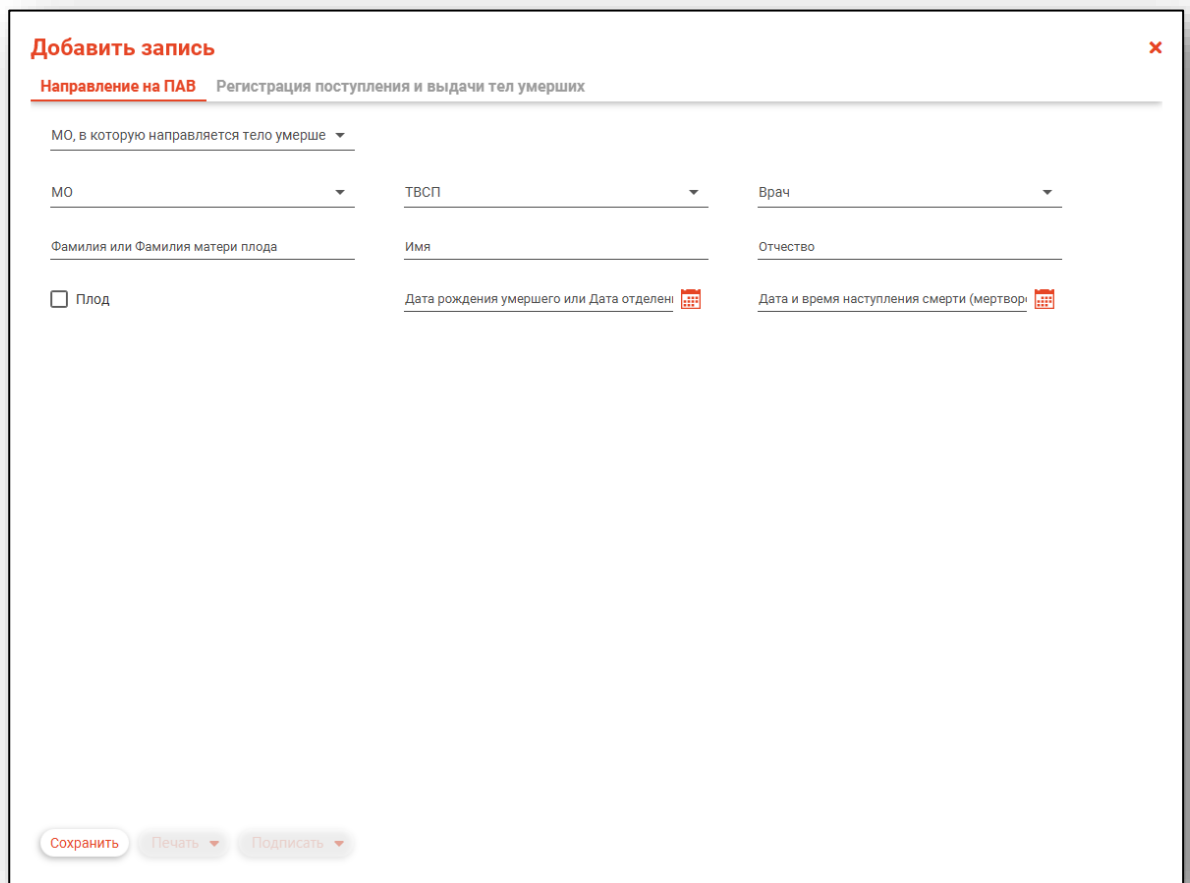

Добавить запись

Направление на ПАВ Регистрация поступления и выдачи тел умерших

МО, в которую направляется тело умерше

МО

Фамилия или Фамилия матери плода

Плод

ТВСП

Имя

Дата рождения умершего или Дата отдели

Врач

Отчество

Дата и время наступления смерти (мертворо

Сохранить Печать Подписать

## Направление на ПАВ

Для создания направления на ПАВ, из выпадающего списка заполните поля «МО, в которую направляется тело умершего», «МО», «ТВСП» и «Врач».

### Добавить запись

**Направление на ПАВ** Регистрация поступления и выдачи тел умерших

МО, в которую направляется тело умершего  
Поликлиника №86

МО  
Поликлиника №86

ТВСП  
Стационар

Врач  
Арсеньева Светлана Владимировна - врач

Фамилия или Фамилия матери плода  
Имя  
Отчество

Плод

Дата рождения умершего или Дата отделения

Дата и время наступления смерти (мертворождения)

Заполните поля «Фамилия», «Имя», «Отчество» вручную. Заполните поля «Дата рождения умершего» и «Дата и время наступления смерти» вручную либо с помощью «Календаря».

### Добавить запись

**Направление на ПАВ** Регистрация поступления и выдачи тел умерших

МО, в которую направляется тело умершего  
Поликлиника №86

МО  
Поликлиника №86

ТВСП  
Стационар

Врач  
Арсеньева Светлана Владимировна - врач

Фамилия или Фамилия матери плода  
Иванова

Имя  
Иванка

Отчество  
Ивановна

Плод

Дата рождения умершего или Дата отделения плод  
05.12.37

Дата и время наступления смерти (мертворождения)  
14.03.2022

Если направление на ПАВ необходимо выписать для плода, поставьте отметку «Плод», заполните поля «Фамилия матери плода», «Дата отделения плода», «Дата и время наступления смерти (мертворождения)».

### Добавить запись

**Направление на ПАВ** Регистрация поступления и выдачи тел умерших

МО, в которую направляется тело умершего  
Поликлиника №86

МО  
Поликлиника №86

ТВСП  
Стационар

Врач  
Арсеньева Светлана Владимировна - врач

Фамилия или Фамилия матери плода  
Иванова

Имя  
Отчество

Плод

Дата рождения умершего или Дата отделения плод  
14.03.2022

Дата и время наступления смерти (мертворождения)  
14.03.2022

После внесения данных нажмите на кнопку «Сохранить» и перейдите во вкладку «Регистрация поступления и выдачи тел умерших».

## Регистрация поступления и выдачи тел умерших

Заполните поле «Дата поступления тела умершего» вручную либо с помощью «Календаря». Поле «ФИО умершего/ ФИО матери (в случае доставки плода)». Из выпадающего списка выберите МО (отделение МО), из которого было доставлено тело.

**Добавить запись** ×

Направление на ПАВ **Регистрация поступления и выдачи тел умерших** Протокол ПАВ

Дата поступления тела умершего 14.03.2022	<input type="text" value="ФИО умершего / ФИО матери (в случае доставки плода или&lt;br/&gt;Иванова Иванка Ивановна"/>	МО (отделение МО), из которой доставлено тело умершего Поликлиника №86
Дата выдачи тела умершего	<input type="text" value="ФИО лица, которому выдано тело умершего, и данные документа, удостоверяющего его личность"/>	

Внесите дату выдачи тела умершего вручную либо с помощью «Календаря». Далее вручную заполните поле «ФИО лица, которому выдано тело умершего, и данные документа, удостоверяющего его личность».

**Добавить запись** ×

Направление на ПАВ **Регистрация поступления и выдачи тел умерших** Протокол ПАВ

Дата поступления тела умершего 14.03.2022	<input type="text" value="ФИО умершего / ФИО матери (в случае доставки плода или&lt;br/&gt;Иванова Иванка Ивановна"/>	МО (отделение МО), из которой доставлено тело умершего Поликлиника №86
Дата выдачи тела умершего 15.03.2022	<input type="text" value="ФИО лица, которому выдано тело умершего, и данные документа, удостоверяющего его личность&lt;br/&gt;Иванова Екатерина Ивановна, паспорт 1111 123456 выдан отделом УФМС"/>	

После внесения данных нажмите на кнопку «Сохранить».



## Протокол ПАВ

Вкладка «Протокол ПАВ» содержит разделы «Паспортная часть», «Протокол вскрытия», «Гистологические препараты», «Диагнозы», «Результат».

### Паспортная часть

Паспортная часть содержит сведения об умершем.

The screenshot shows a web application interface for adding a record. At the top, there is a title bar with the text 'Добавить запись' (Add record) and a close button. Below the title bar, there are navigation tabs: 'Направление на ПАВ' (Direction to PAW), 'Регистрация поступления и выдачи тел умерших' (Registration of receipt and issue of deceased bodies), and 'Протокол ПАВ' (PAW protocol), which is currently selected. The main content area is divided into a left sidebar and a main form. The sidebar contains a list of sections: 'Паспортная часть' (Passport part), 'Протокол вскрытия' (Autopsy protocol), 'Гистологические препараты' (Histological preparations), 'Диагнозы' (Diagnoses), and 'Результат' (Result). The main form is titled 'Паспортная часть' and contains the following fields and controls:







- Text input: 'МО и отделение, на прикрепленной территории которой умер пациент' (MO and department, on the attached territory where the patient died).
- Text input: 'Номер мед. карты пациента' (Patient's medical card number).
- Dropdown menu: 'Семейное положение' (Family status).
- Dropdown menu: 'Образование' (Education).
- Dropdown menu: 'Занятость' (Occupation).
- Date and time pickers: 'Дата поступления в МО' (Date of admission to MO), 'Время поступления в ИМС' (Time of admission to ICS), 'Дата проведения ПАВ' (Date of PAW), and 'Время проведения ПАВ' (Time of PAW).
- Text input: 'Умер после начала заболевания через (дней)' (Died after the start of the disease in days).
- Text input: 'Умер после начала заболевания через (часов)' (Died after the start of the disease in hours).
- Text input: 'ФИО врача' (Doctor's full name).
- Checkbox: 'Лечащий врач (заведующий отделением) присутствовал на ПАВ' (Attending physician (head of department) was present at PAW).
- Text input: 'Основные клинические данные' (Main clinical data).
- Text input: 'Заключительный клинический диагноз' (Final clinical diagnosis).
- Text input: 'Основной диагноз' (Main diagnosis).
- Text input: 'Описание основного диагноза' (Description of the main diagnosis).
- Buttons: 'Осложнение основного заболевания' (Complication of the main disease) and 'Сопутствующие заболевания' (Comorbidities), both with a 'Нет данных' (No data) button below them.

Заполните поля «МО и отделение, на прикрепленной территории которой умер пациент», «Номер мед. карты пациента».

Из выпадающего списка заполните поля «Семейное положение», «Образование», «Занятость».

Поля «Дата поступления в МО», «Дата проведения ПАВ» заполняется вручную либо с помощью «Календаря». Поля «Время поступления в МО», «Время проведения ПАВ» заполняются вручную либо с помощью «Часов».

**Паспортная часть**

МО и отделение, на прикреплённой территории которой умер пациент Поликлиник 86		Номер мед. карты пациента 1486	
Семейное положение 1 - состоял(а) в зарегистрированном браке	▼	Образование 1 - профессиональное: высшее	▼
Занятость 4 - Неработающий	▼		
Дата поступления в МО 14.03.2022		Время поступления в МО 19:05	
Дата проведения ПАВ 15.03.2022		Время проведения ПАВ 11:00	
Умер после начала заболевания через (дней)		Умер после начала заболевания через (часов)	
ФИО врача			
<input type="checkbox"/> Лечащий врач (заведующий отделением) присутствовал на ПАВ			
Основные клинические данные		Заключительный клинический диагноз 	
Основной диагноз 		Описание основного диагноза	
Осложнение основного заболевания Нет данных		Сопутствующие заболевания Нет данных	

Поля «Умер после начала заболевания через (дней)», «Умер после начала заболевания через (часов)» заполняются вручную.

Внесите ФИО врача, проводившего вскрытие. Поставьте отметку, если лечащий врач (заведующий отделением) присутствовал на ПАВ.

**Паспортная часть**

МО и отделение, на прикреплённой территории которой умер пациент Поликлиник 86		Номер мед. карты пациента 1486	
Семейное положение 1 - состоял(а) в зарегистрированном браке	Образование 1 - профессиональное: высшее		
Занятость 4 - Неработающий			
Дата поступления в МО 14.03.2022	Время поступления в МО 19:05	Дата проведения ПАВ 15.03.2022	Время проведения ПАВ 11:00
Умер после начала заболевания через (дней) 5	Умер после начала заболевания через (часов)		
ФИО врача Арсеньева С.В.			
<input checked="" type="checkbox"/> Лечащий врач (заведующий отделением) присутствовал на ПАВ			
Основные клинические данные		Заключительный клинический диагноз	
Основной диагноз		Описание основного диагноза	
Осложнение основного заболевания Нет данных		Сопутствующие заболевания Нет данных	

Поля «Основные клинические данные», «Описание основного диагноза» заполняются вручную.

Поля «Заключительный клинический диагноз» и «Основной диагноз» заполняются с помощью кнопки «Выбрать значение из списка».

Лечащий врач (заведующий отделением) присутствовал на ПАВ


Основные клинические данные	Заключительный клинический диагноз
Основной диагноз	Описание основного диагноза
Осложнение основного заболевания Нет данных	Сопутствующие заболевания Нет данных

Чтобы внести информацию в блоки «Осложнение основного заболевания» и «Сопутствующие заболевания», нажмите на кнопку «Меню» и выберите действие «Добавить».

Осложнение основного заболевания Добавить Нет данных	Сопутствующие заболевания Нет данных
---	---

Будет открыто новое окно «Осложнение основного заболевания» либо «Сопутствующие заболевания», в зависимости от заполняемого блока. Проставьте отметки напротив нужных диагнозов и нажмите «Ок».

Для просмотра всех выбранных диагнозов поставьте отметку «Только выбранные».

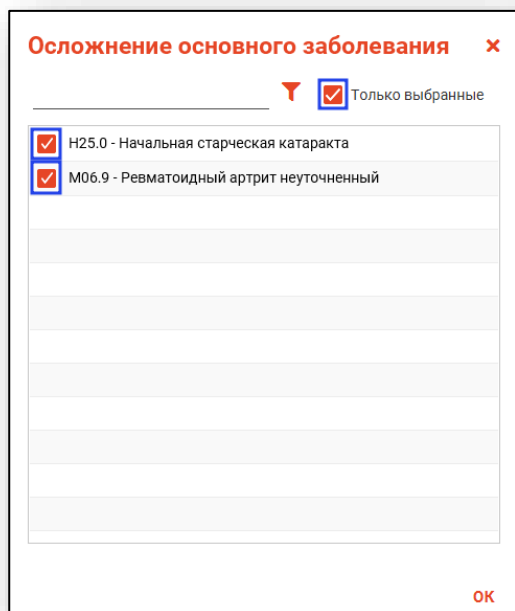


The screenshot shows a dialog box titled «Осложнение основного заболевания» with a close button (x) in the top right corner. Below the title is a search bar and a filter icon (funnel) next to a checked checkbox labeled «Только выбранные». The main area contains a list of two items, each with a checked checkbox on the left:

- H25.0 - Начальная старческая катаракта
- M06.9 - Ревматоидный артрит неуточненный

Below these are several empty rows. At the bottom right of the dialog is an «OK» button.

После внесения диагнозов они отобразятся в выбранном блоке.

Чтобы удалить ошибочно внесенный диагноз, нажмите на пиктограмму справа от строки диагноза.

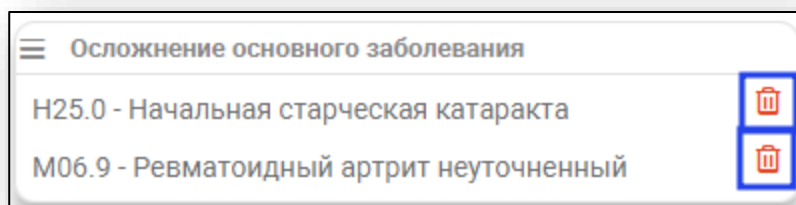

The screenshot shows a list view of the selected complications. The title «Осложнение основного заболевания» is at the top left. The list contains two items:

- H25.0 - Начальная старческая катаракта
- M06.9 - Ревматоидный артрит неуточненный

To the right of each item is a trash can icon, which is highlighted with a blue box in the image.

## Протокол вскрытия

Раздел «Протокол вскрытия» содержит описательную часть протокола вскрытия.

Поля заполняются вручную. Некоторые поля возможно заполнить из выпадающего списка.

Направление на ПАВ    Регистрация поступления и выдачи тел умерших    **Протокол ПАВ**

- Паспортная часть
- Протокол вскрытия**
- Гистологические препараты
- Диагнозы
- Результат

### Протокол вскрытия

▼ **Наружный осмотр тела**

Рост, см                      Масса тела, кг                      Телосложение [i]

Состояние питания ▼                      Состояние мышечной и костной систем

Трупные пятна и их расположение                      Выраженность и распространённость трупного окоченения

Состояние естественных отверстий                      Наружные половые органы

▼ **Кожный покров**

Головы                      Шеи                      Грудь                      Туловища

Конечностей

▼ **Операционные раны**

+ ✎ 🗑

Длина разреза, см	Характер операционной раны	Швы	Выделения из раны	Следы инъекц

Для внесения информации в блок «Операционные раны» нажмите на кнопку «Добавить».

▼ **Операционные раны**

+ ✎ 🗑

Длина разреза, см	Характер операционной раны	Швы	Выделения из раны	Следы инъекц

Будет открыто новое окно «Операционные раны». Поля в окне заполняются вручную. После внесения информации нажмите «Ок».

### Операционные раны ✕

длина разреза, см \_\_\_\_\_

Характер операционной раны \_\_\_\_\_

Швы \_\_\_\_\_



Выделения из раны \_\_\_\_\_

Следы инъекций и изменения в их зоне \_\_\_\_\_

**ОК**

Чтобы внести изменения в ранее созданную запись, выделите нужную запись из списка одним кликом и нажмите на кнопку «Редактировать».

▼ **Операционные раны**



+  

Длина разреза, см	Характер операционной раны	Швы	Выделения из раны	Следы инъекции
5	4		отсутствуют	нет

Внесите в запись нужные изменения и нажмите «Ок».

Для удаления ошибочно созданной записи, выделите нужную запись из списка одним кликом и нажмите на кнопку «Удалить».

▼ **Операционные раны**


+  

Длина разреза, см	Характер операционной раны	Швы	Выделения из раны	Следы инъекции
5	4		отсутствуют	нет


## Гистологические препараты

Раздел «Гистологические препараты» содержит блоки «Гистологические исследования» и «Дополнительные исследования».

Чтобы внести информацию в блок, нажмите на кнопку «Меню» и выберите действие «Добавить».

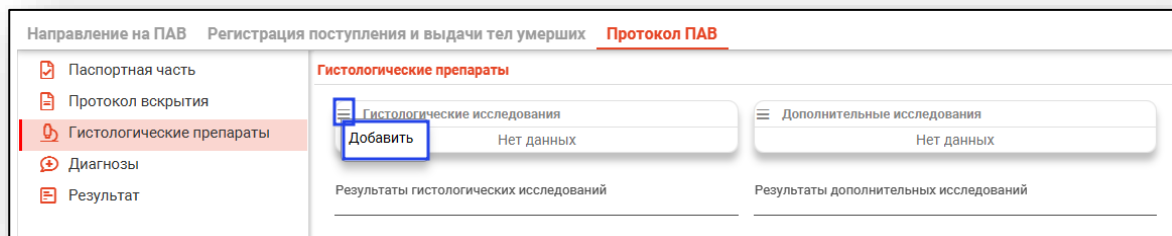

Будет открыто новое окно «Гистологические исследования», в котором необходимо проставить отметку напротив нужного материала. После выбора нужного значения нажмите «Ок».

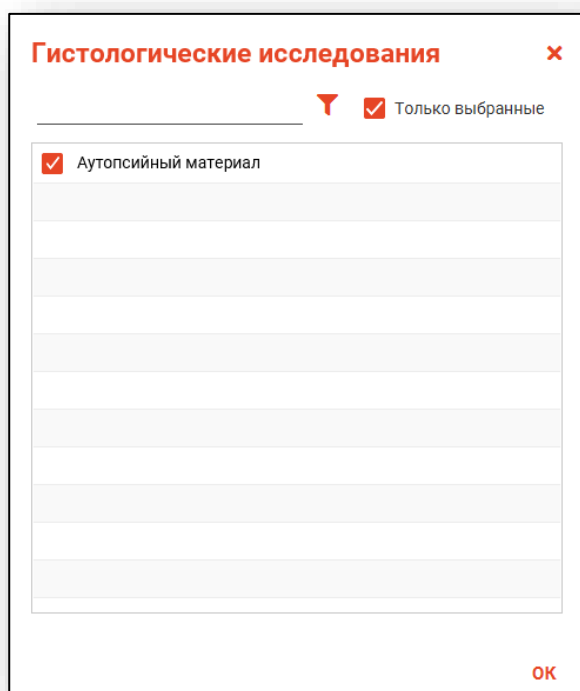

Удалить ошибочно внесенное значение возможно с помощью пиктограммы справа от строки.

Гистологические препараты

Гистологические исследования

Аутопсийный материал

Дополнительные исследования

Нет данных

Результаты гистологических исследований

Результаты дополнительных исследований

Блок «Дополнительные исследования» заполняется аналогично. Поля «Результаты гистологических исследований» и «Результат дополнительных исследований» заполняются вручную.

Гистологические препараты

Гистологические исследования

Аутопсийный материал

Дополнительные исследования

Нет данных

Результаты гистологических исследований

Результаты дополнительных исследований

## Диагнозы

Раздел «Диагнозы» содержит сведения о патолого-анатомическом диагнозе (предварительном) и патолого-анатомическом диагнозе.

Чтобы внести диагноз, нажмите на кнопку «Выбрать значение из списка».

Направление на ПАВ    Регистрация поступления и выдачи тел умерших    **Протокол ПАВ**

Паспортная часть

Протокол вскрытия

Гистологические препараты

**Диагнозы**

Результат

**Диагнозы**

▼ Патолого-анатомический диагноз(предварительный)

Основной диагноз

Описание основного диагноза

Осложнение основного заболевания

Сопутствующие заболевания

Нет данных

Нет данных

▼ Патолого-анатомический диагноз

Основной диагноз

Описание основного диагноза

Осложнение основного заболевания

Сопутствующие заболевания

Нет данных

Нет данных

Сопоставление заключительного клинического диагноза и патолого-анатомического диагноза



Будет открыто новое окно «Основной диагноз», в котором необходимо выбрать значение.

The dialog box titled "Основной диагноз" (Main Diagnosis) contains a list of medical conditions. The list items are:

- A00 - Холера
- A00.0 - Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар cholerae
- A00.1 - Холера, вызванная холерным вибрионом 01, биовар eltor
- A00.9 - Холера неуточненная
- A01 - Тиф и паратиф
- A01.0 - Брюшной тиф
- A01.1 - Паратиф А
- A01.2 - Паратиф В
- A01.3 - Паратиф С
- A01.4 - Паратиф неуточненный
- A02 - Другие сальмонеллезные инфекции
- A02.0 - Сальмонеллезный энтерит

An "OK" button is located at the bottom right of the dialog.

Поле «Описание основного диагноза» заполняется вручную.

The form displays the "Основной диагноз" (Main Diagnosis) section. The current diagnosis is "R54 - Старость". To the right of this text is a red pencil icon and a text input field labeled "Описание основного диагноза". Below this are two expandable sections:

- "Осложнение основного заболевания" (Complication of the main disease) with the text "Нет данных" (No data).
- "Сопутствующие заболевания" (Concomitant diseases) with the text "Нет данных" (No data).

At the bottom of the form, there is a section titled "Сопоставление заключительного клинического диагноза и патолого-анатомического диагноза" (Correlation of final clinical diagnosis and pathological-anatomical diagnosis).

Чтобы заполнить блоки «Осложнение основного заболевания» и «Сопутствующие заболевания», нажмите на кнопку «Меню» и выберите действие «Добавить».

▼ Патолого-анатомический диагноз

Основной диагноз  
R54 - Старость

Описание основного диагноза

Осложнение основного заболевания

Добавить Нет данных

Сопутствующие заболевания

Нет данных

Сопоставление заключительного клинического диагноза и патолого-анатомического диагноза

Будет открыто новое окно «Осложнение основного заболевания» либо «Сопутствующие заболевания», в зависимости от заполняемого блока. Проставьте отметки напротив нужных диагнозов и нажмите «Ок».

Для просмотра всех выбранных диагнозов поставьте отметку «Только выбранные».

Осложнение основного заболевания

Только выбранные

H25.0 - Начальная старческая катаракта

M06.9 - Ревматоидный артрит неуточненный

OK

После внесения диагнозов они отобразятся в выбранном блоке.

Чтобы удалить ошибочно внесенный диагноз, нажмите на пиктограмму справа от строки диагноза.

**▼ Патолого-анатомический диагноз**

Основной диагноз  
R54 - Старость

Описание основного диагноза

Осложнение основного заболевания

- H25 - Старческая катаракта
- M06.9 - Ревматоидный артрит неуточненный

Сопутствующие заболевания

Нет данных

Сопоставление заключительного клинического диагноза и патолого-анатомического диагноза

Поле «Сопоставление заключительного клинического диагноза и патолого-анатомического диагноза» заполняется вручную.

**▼ Патолого-анатомический диагноз**

Основной диагноз  
R54 - Старость

Описание основного диагноза

Осложнение основного заболевания

- H25 - Старческая катаракта
- M06.9 - Ревматоидный артрит неуточненный

Сопутствующие заболевания

Нет данных

Сопоставление заключительного клинического диагноза и патолого-анатомического диагноза

## Результат

Раздел «Результат» содержит поля «Описание результатов дополнительных исследований», «Дефекты оказания медицинской помощи», «Причины смерти» и «Патолого-анатомический эпикриз». Все поля из данного раздела заполняются вручную.

Направление на ПАВ    Регистрация поступления и выдачи тел умерших    **Протокол ПАВ**

Паспортная часть  
 Протокол вскрытия  
 Гистологические препараты  
 Диагнозы  
 **Результат**

**Результат**

Описание результатов дополнительных исследований

Дефекты оказания медицинской помощи

Причина смерти

Клинико-патолого-анатомический эпикриз

После внесения всех данных нажмите на кнопку «Сохранить».

## Редактирование записи

Для редактирования созданной записи о патолого-анатомическом вскрытии, выберите нужную запись из списка одним кликом и нажмите на кнопку «Редактировать», либо откройте запись двойным кликом.

Патолого-анатомическое вскрытие

Начало периода: 02.03.2022    Окончание периода: 16.03.2022

Всего	MO	ТВСП	Врач: Фамилия, имя, отчество	Подгруппа «Врач»	Должность	Статус «Плод»	Подгруппа «Умерший»	Дата и время
1	Поликлиника №86	Стационар	Арсеньева Светлана Владимиро...	врач-терапевт		Все	Иванова Иванна Ивановна	05.12.0037

## Удаление записи

Чтобы удалить ошибочно созданную запись о патолого-анатомическом вскрытии, выберите нужную запись из списка одним кликом и нажмите на кнопку «Удалить».

Патолого-анатомическое вскрытие

Начало периода: 02.03.2022    Окончание периода: 16.03.2022

Всего	MO	ТВСП	Врач: Фамилия, имя, отчество	Подгруппа «Врач»	Должность	Статус «Плод»	Подгруппа «Умерший»	Дата и время
1	Поликлиника №86	Стационар	Арсеньева Светлана Владимиро...	врач-терапевт		Все	Иванова Иванна Ивановна	05.12.0037

## Подпись документа

Для патолого-анатомического вскрытия доступна возможность подписать направление на ПАВ и протокол ПАВ. Чтобы подписать документ, нажмите на кнопку «Подписать» внутри документа и выберите нужное действие.

### Редактировать запись ✕

**Направление на ПАВ**    Регистрация поступления и выдачи тел умерших    Протокол ПАВ


МО, в которую направляется тело умершего Поликлиника №86	ТВСП Стационар	Врач Арсеньева Светлана Владимировна - врач
МО Поликлиника №86	Имя Иванка	Отчество Ивановна
Фамилия или Фамилия матери плода Иванова	Дата рождения умершего или Дата отделения плода 05.12.37	Дата и время наступления смерти (мертворождения) 14.03.2022

Плод

Сохранить    Печать    **Подписать**

Направление на ПАВ  
Протокол ПАВ  
Протокол ПАВ плода, мертворождённого или новорождённого

Выберите криптопровайдера, подпись врача и сертификат организации. Далее будет открыто окно сохранения подписанного документа. Выберите, куда необходимо сохранить документ и нажмите на кнопку «Сохранить».

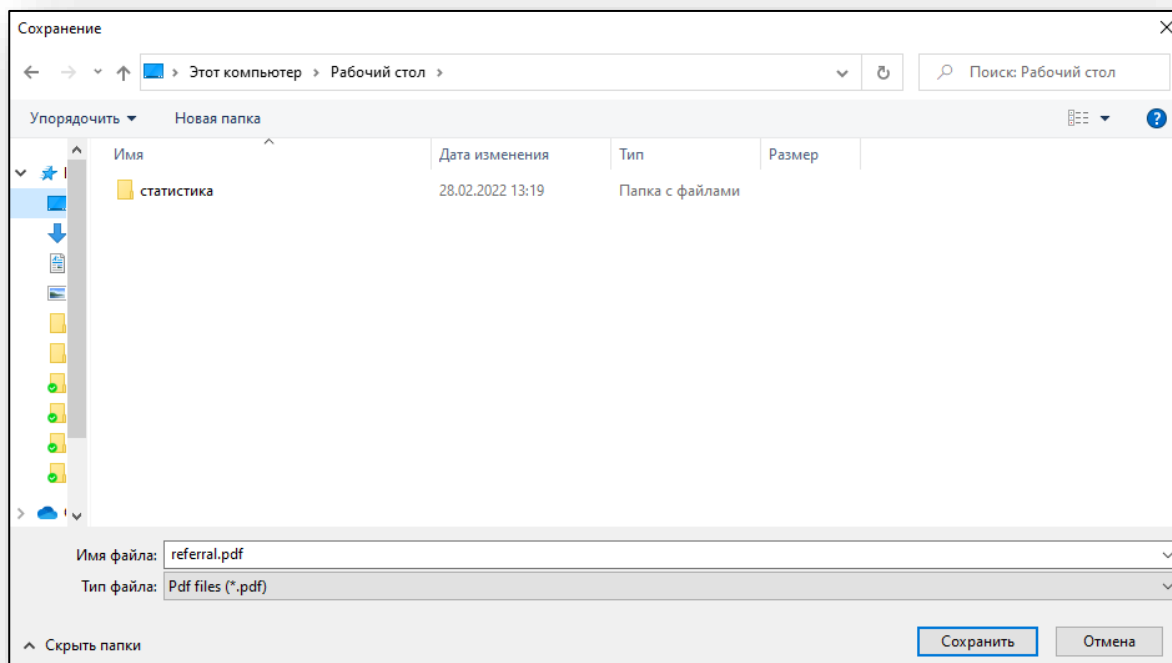

Документ будет сохранен в формате pdf и содержать подписи врача и медицинской организации.

Направление на патолого-анатомическое вскрытие	
Наименование медицинской организации, в которую направляется тело умершего:	Полклиника №86
Наименование медицинской организации, врач (фельдшер) которой осуществляет направление тела умершего в патолого-анатомическое отделение:	Полклиника №86
Наименование подразделения медицинской организации, врач (фельдшер) которой осуществляет направление тела умершего в патолого-анатомическое отделение:	Стационар
Фамилия, имя, отчество умершего (фамилия матери плода):	Иванова Иванка Ивановна
Дата рождения умершего /Дата отделения плода:	05.12.0037
Дата и время наступления смерти (мертворождения):	14.03.2022
Дата и время подписания направления:	16.03.2022 10:46
Медицинский работник:	Арсеньева Светлана Владимировна
Должность медицинского работника:	врач-терапевт
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p style="text-align: center;"><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p><p>Сертификат: afbc26f05419ea81971bc264a31da3419eeb8 Организация: <b>Полклиника 86</b> СГРН: 0000000000000 Владелец: <b>Мышкин Валерий Альбертович</b> Действителен с 15.12.2021 по 09.12.2022</p></div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"><p style="text-align: center;"><b>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</b></p><p>Сертификат: afbc26f05419ea81971bc264a31da3419eeb8 Организация: <b>Полклиника 86</b> СГРН: 0000000000000 Владелец: <b>Мышкин Валерий Альбертович</b> Действителен с 15.12.2021 по 09.12.2022</p></div>	

## Печать

Для патолого-анатомического вскрытия возможно распечатать направление на ПАВ, журнал регистрации тел умерших, отказ от ПАВ, протокол ПАВ.

Чтобы распечатать документ, нажмите на кнопку «Печать» внутри документа и выберите нужное действие.

### Редактировать запись ✕

**Направление на ПАВ**    Регистрация поступления и выдачи тел умерших    Протокол ПАВ


МО, в которую направляется тело умершего Поликлиника №86	твсп Стационар	Врач Арсеньева Светлана Владимировна - врач
МО Поликлиника №86	Имя Иванка	Отчество Ивановна
Фамилия или Фамилия матери плода Иванова	Дата рождения умершего или Дата отделения плода 05.12.37	Дата и время наступления смерти (мертворождения) 14.03.2022

Плод

Направление на ПАВ  
Журнал регистрации тел умерших  
Отказ от ПАВ  
Протокол ПАВ  
Протокол ПАВ плода, мертворождённого или новорождённого

Сохранить    Печать    Подписать

Будет открыто окно предпросмотра документа, в котором можно просмотреть сформированный документ, после чего сохранить в нужном формате либо отправить на печать.

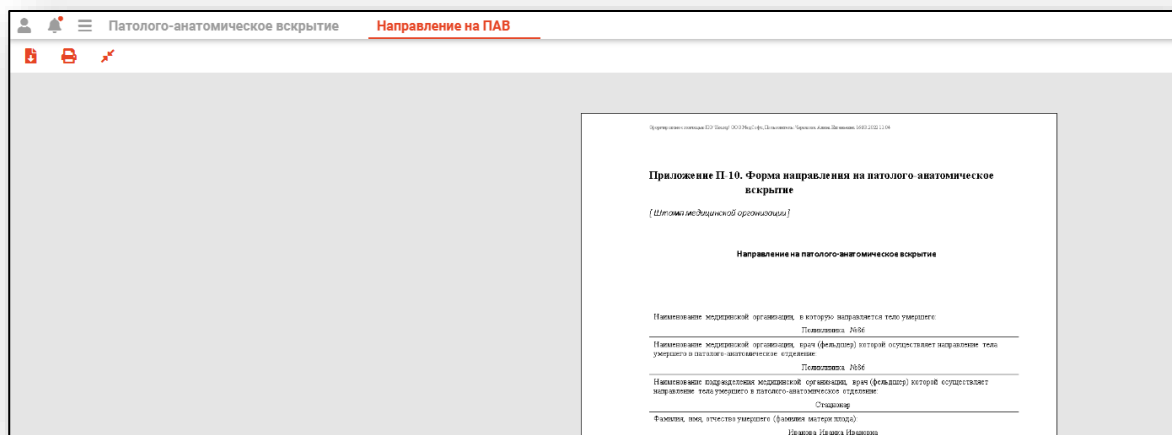

Патолого-анатомическое вскрытие **Направление на ПАВ**

Приложение П 10. Форма направления на патолого-анатомическое вскрытие  
{Штатная медицинская организация}

**Направление на патолого-анатомическое вскрытие**

Наименование медицинской организации, в которой производится тело умершего  
Полное наименование МБЗ

Наименование медицинской организации (филиала) которой осуществляется направление тела умершего в патолого-анатомическое отделение  
Полное наименование МБЗ


Наименование подразделения медицинской организации (участка, пункта (филиала)) которой осуществляется направление тела умершего в патолого-анатомическое отделение  
Отделение

Фамилия, имя, отчество умершего (заполняется матерью умершего)  
Имя умершего Иванова Иван Иванович



## Экспорт журнала

Журнал «Патолого-анатомическое вскрытие» возможно экспортировать в формат CSV. Для этого необходимо нажать на кнопку «Показать действия» и выбрать «Экспортировать данные».

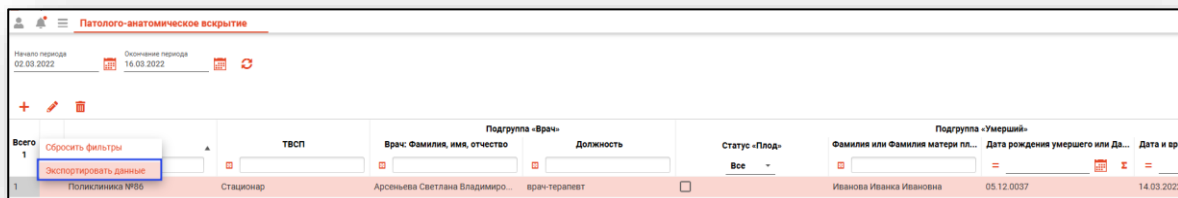

Откроется окно сохранения, в котором будет предложено присвоить имя файлу и место, куда его сохранить. Укажите нужные данные и нажмите на кнопку «Сохранить».

